


Metkownica MELAdoc

karta katalogowa

Producent:	MELGA
Kraj:	Niemcy
Typ rejestratora:	metkownica
Nośnik zapisu:	etykiety
Format zapisu:	-

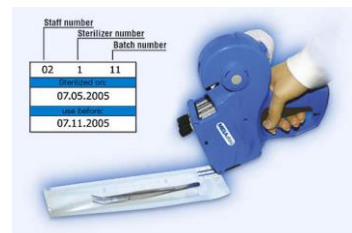

Udokumentowanie przeprowadzonych procesów sterylizacji staje się wymogiem zapewniającym bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i gabinetu stomatologicznego.



Melag oferuje metkownicę MELAdoc ułatwiającą i upraszczającą oznaczenie oraz dokumentację wysterylizowanych narzędzi, tkanin. Metkownica MELAdoc jest przeznaczona do naklejania etykiet samoprzylepnych używanych do dokumentacji procesu sterylizacji.

Posiada ergonomiczny kształt i jest wykonana z tworzywa sztucznego. Umożliwia nadruk na etykietach samoprzylepnych informacji kodowanych alfanumerycznie.


Drukowane dane są rozmieszczone w trzech wierszach. Etykiety cechują się możliwością naklejania, a następnie oderwania wierzchniej warstwy i ponownego jej przyklejenia w innym miejscu (są dwukrotnie przylepne).

Trzy wiersze - pola etykiet przeznaczone są do naniesienia następujących informacji:

- pierwszy wiersz:
 - numer osoby obsługującej sterylizator (odpowiedzialnej za sterylizację)
 - numer sterylizacji
 - numer pakietu
- drugi wiersz:
 - data przeprowadzonej sterylizacji pakietu
- trzeci wiersz:
 - data ważności wysterylizowanego pakietu

02	1	11
Sterilized on:		
07.05.2005		
use before:		
07.11.2005		

Wydruki powinny być dołączone do opakowań wysterylizowanych narzędzi lub materiałów przed ich składowaniem. Po zakończonym zabiegu wydruki powinny być usuwane z opakowań i dołączane do kart pacjenta.

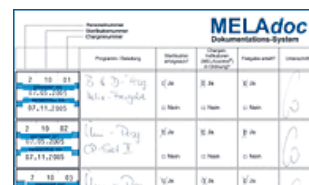

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach oraz wiele materiałów video i porównań.

www.autoklaw.pl